


วิธีการเก็บตัวอย่างในระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

** เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันของสวอปแต่ละชนิด กรุณาใช้สวอปตามที่จัดให้เท่านั้น**

ส่งตรวจ Sofia Influenza FIA Test

ตัวอย่างที่แนะนำ : nasal swab

วิธีการเก็บตัวอย่าง nasal swab

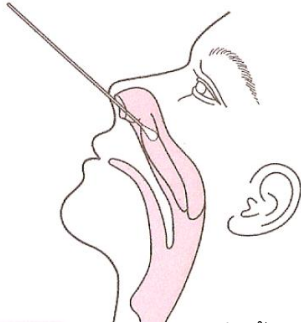

ให้ผู้ป่วยเงยหน้าขึ้น เลือกเก็บตัวอย่างจากข้างที่มีน้ำมูกมาก หากจุกแฉะมาก ให้หมาดหัวสวอปด้วยน้ำเกลือ 1 หยด หมุนสวอปเข้าไปเบาๆจนชนผนังจมูก (ลึกไม่เกิน 1 นิ้ว) หมุนสวอป 2-3 รอบให้สัมผัสผนังช่องจมูก ใส่สวอปลงในหลอดเปล่าที่จัดให้แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างที่แนะนำ : nasopharyngeal aspirate

วิธีการเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal aspirate



ให้ผู้ป่วยแหงนหน้าขึ้น หยดน้ำเกลือลงในช่องจมูก 2-3 หยด สอดสายพลาสติกที่ต่อกับ suction เข้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เปิด suction พร้อมกับถอนสายพลาสติกออก หากได้ตัวอย่างไม่เพียงพอ ให้ทำซ้ำอีกข้างหนึ่ง

Flu A ความไว: 90% ความจำเพาะ: 95%


Flu B ความไว: 89% ความจำเพาะ: 96%

Flu A ความไว: 99% ความจำเพาะ : 96%

Flu B ความไว: 88% ความจำเพาะ: 96%

ตัวอย่างที่แนะนำ : nasopharyngeal swab


วิธีการเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab

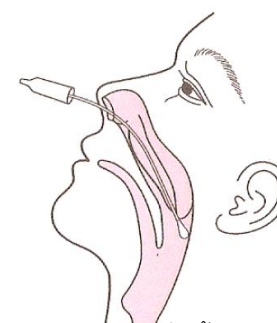

ให้ผู้ป่วยเงยหน้าขึ้น เลือกเก็บตัวอย่างจากข้างที่มีน้ำมูกมาก ถูสวอปตั้งฉากกับไบหน้า หมุนสวอปเข้าไปเบาๆตาม septum floor เมื่อสวอปอยู่ในตำแหน่ง posterior nasopharynx (ระยะกึ่งกลางระหว่างรูจมูกหรือหู) ให้หมุนสวอป 2-3 รอบ ใส่สวอปลงในหลอดเปล่าที่จัดให้ แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างที่แนะนำ nasopharyngeal wash

วิธีการเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal wash

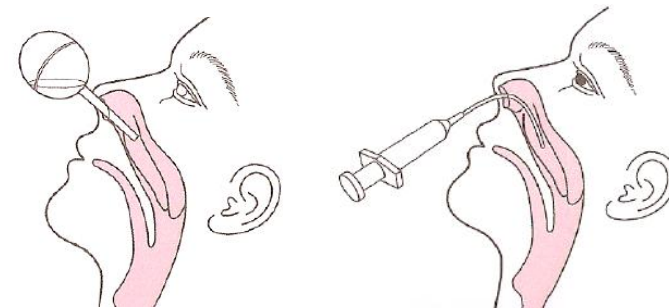

ให้ผู้ป่วยแหงนหน้าขึ้น หยดน้ำเกลือลงในช่องจมูกด้วยกระเปาะยางหรือ กระบอกฉีดยา ประมาณ 1-2 cc เอาถ้วยเก็บตัวอย่างรองที่เหนือริมฝีปาก แล้วให้ผู้ป่วยก้มหน้าลง นำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ (ปริมาณน้ำเกลือที่มากก็จะทำให้ตัวอย่างเจือจางมาก)

Flu A ความไว: 97% ความจำเพาะ: 95%

Flu B ความไว: 90% ความจำเพาะ: 97%

Flu A ความไว: 99% ความจำเพาะ : 96%

Flu B ความไว: 88% ความจำเพาะ: 96%